

YAMAN
TOKYO JAPAN

保管用
附保修卡

使用说明书

RF射频美容仪


Bloom 5

YJFS16

目录

前言.....1
安全注意事项.....1
海外使用注意事项.....6
各部位的名称及功能.....7
使用前.....9
使用方法.....11
使用后.....15

须知.....17
●疑似故障.....17
●常见问题.....19
●产品规格.....20
售后服务.....21
废弃方式.....22
有害物质或元素.....23

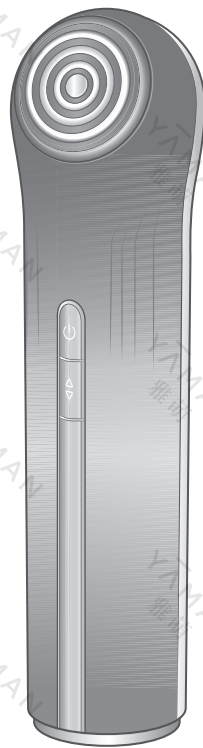

前言


非常感谢您购买雅萌产品

- 为确保正确、安全使用,请仔细阅读使用说明书。
- 阅读后,请务必保管在能够随时取阅的场所。
- 将本产品转让给他人时,请务必附带使用说明书。


安全注意事项

- 使用前,请仔细阅读“安全注意事项”。
- 请按照规定步骤合理使用。
- 发生异常时,请立即停止使用。
- 如果在故障状态下使用,可能会对身体产生不良影响,请务必注意。
- 此处的注意事项写明了与安全有关的重要内容,请务必遵守。
- 为表明危害及损害的大小和紧迫程度,将因误操作而发生的状况分为“危险”、“警告”、“注意”。

●关于注意事项


 **危险** 不正当使用本产品会导致严重伤亡事故。


 **警告** 不正当使用本产品可能会导致严重伤亡事故。

 **注意** 不正当使用本产品可能会导致人身伤害或引起财物受损。

※所谓财物受损,是指涉及房屋、家具以及家禽、宠物的损害。

●关于标识符号

 表示禁止的事项。

 表示务必遵守的事项。

 表示务必注意的事项。

危险 (关于使用和保管)

● 以下人员请勿使用

可能会导致医用电子仪器发生故障

◆ 正在使用以下医用电子仪器人员

· 心脏起搏器等体内植入式医用电子仪器 · 人造心肺机等维持生命用医用电子仪器 · 心电图描写器等穿戴型医用电子仪器



禁止

警告 (关于使用和保管)

● 具有以下情况人群, 请勿使用。

否则容易引起事故或导致皮肤、乃至身体问题。

· 心脏疾病患者、心脏功能障碍或者具有功能障碍倾向的患者

· 无法表达自己意识的人群 · 无法感知温度以及刺激的人群

· 具有自身免疫性疾病患者



禁止

● 以下人群请慎重, 使用前请咨询专业医师后再使用。

· 急性病患者 · 传染病患者 · 恶性肿瘤 · 高血压患者和血液病患者 · 发热或体温异常者

· 糖尿病等高度末梢循环功能障碍导致的知觉障碍者 · 神经障碍者 · 皮肤病患者及遗传性皮炎患者

· 住院且服药人群 · 易过敏体质、接触性皮炎等, 有皮肤病史或使用中皮肤感觉不适的人群

· 孕期及哺乳期人群 · 高度近视者 (-6D以上)

● 以下情况及部位请勿使用。

否则容易引起事故或导致皮肤、乃至身体问题。

· 皮肤出现受损、皮疹、炎症、瘙痒等异常的部位 · 酒后人群 · 头部 · 口腔内、阴部、粘膜处等 · 眼球 · 上眼睑等眼眶内区域

· 下眼睑、眼角 (POWER档以外) · 喉咙 · 凸起的痣 · 病毒性疣 · 骨折部位

· 接受美容外科手术仍在恢复期的部位 (如出血、肿胀、结痂等)

※ 接受手术后2周请慎重使用。若自身无法判断是否可以使用时, 请先征询专业医生的意见。

(手术示例: 玻尿酸注射、硅胶填充、肉毒杆菌素、埋线提拉、双眼皮整形、超声刀等)

· 接受整形外科 (塑形、整形、美容) 等体内接受过金属植入等外科手术部位

● 请勿在肌肤较薄的部位、骨骼上方长时间使用。

会造成肌肤以及身体的损伤。

警告 (关于使用和保管)

- 请勿过度使用机器。请严格按照操作说明书规定的使用时间以及使用频率进行护理。
可能会引起事故或受伤。
- 使用前请确认电极头是否有破裂、变形、破损等情况,如有以上情况,请勿使用。
可能会造成皮肤问题。
- 请勿在下列情况下使用、保管或给机器充电。
 - 浴室、浴槽、花洒、洗面台等湿气较重的场所,容易沾水的场所
 - 灰尘较多的场所
 - 阳光直射的场所或室外
 - 容易倾斜、震动、被撞击的场所
 - 有强电波或磁场的场所
 - 易燃性物品附近(酒精、稀释剂、汽油、洗甲水和定型喷雾等)
 - 有油烟、水蒸气的场所
 - 发热器具(炉子等)周围等高温场所
 - 温差较大的场所(空调、暖气等的旁边)可能会引起火灾、触电、意外、故障或跌倒。
- 如电源适配器出现破损,请勿使用。
请联系当地经销商或雅萌中国官方总代理(P.21)。
- 若插线使用,请勿从插座或主机一侧拔下插头。
可能会引起触电、短路引发的着火或火灾。请务必关闭电源后再拔下插头。



禁止

- 请勿在通电状态下放置机器。
可能会引起火灾或事故。
- 请务必使用专用的电源适配器。
可能会引起触电、短路或着火。



禁止

- 请勿用于使用说明中注明以外的用途。
可能会引起产品故障、受伤等。



禁止用于
其他用途

- 未成年人请在征得监护人同意并在陪同下使用。
可能会引起事故或受伤。



使用限制

- 请将主机、电源适配器放置于儿童接触不到的场所。请勿让儿童使用或玩耍。
可能会引起事故或受伤。

- 请勿让神志不清者使用。此外,请避免残疾人士单独进行使用。
可能会引起事故或受伤。




- 请勿投入火中以及请勿在加热、高温、高压的环境下充电、使用和放置。






本产品内置充电电池。可能会引起发热、着火或故障。

着火注意

警告 (关于使用和保管)

- 机器摔落、破损等情况,请立即关闭电源,并联系当地经销商或雅萌中国官方总代理客户服务热线(P.21)。
可能会引起火灾、触电等。
 务必遵守
- 请务必使用100V~240V交流电压。
电源适配器须切实插入。
可能会引起触电、短路或火灾。
- 请勿拆解、修理或改造主机。
可能会引起火灾、触电或受伤。
维修事宜请咨询经销商或雅萌中国总代理客户服务热线(P.21)。
 禁止拆解
- 地震或打雷的情况下,请关闭电源,拔掉电源适配器。
可能会引起火灾、触电等。
 拔出插头
- 拔下电源适配器时,请务必手持插头前端拔出(不接触金属部位)。另外,请勿用湿手插拔。
可能会引起触电、短路、着火或故障。
- 使用后、不使用时,以及护理主机时,请务必关闭电源,拔掉电源适配器。
结束充电时,请将电源适配器从插座上拔出。否则可能会引起火灾或事故。

- 请勿连接超出插座或接线设备额定容量的排线(排插)。
可能会引起触电、短路、着火或故障。
 禁止使用排插
- 电源适配器受损或插头松动时,请勿使用。
可能会引起触电、短路、着火或故障。
维修事宜请咨询经销商或雅萌中国总代理客户服务热线(P.21)。
 禁止使用损坏的电线插头
- 请勿损坏、加工、用力弯曲及捆扎电源适配器。
电源线破损,可能会引起火灾或触电。
收纳时,请恢复被扭曲的电源线。
 禁止粗暴使用

注意 (关于使用和保管)

- 请勿强力按压, 请勿持续在同一个部位使用。
可能会引起肌肤损伤。
 - 请勿在车辆行驶过程中使用。
可能会引起事故或受伤。
 - 电源开启的状态下, 请勿与其他美容仪器或者电器产品接触。
请勿其他的电器产品(电热毯、电暖桌等)同时使用。
误动作会引起事故、受伤及机件故障。
 - 请勿直视LED光。
可能会引起眼部不适。
-
- 初次使用或尚未适应之前, 请务必从1档开始使用。
即使感觉不到刺痛感, 也请勿勉强把档位调高。请选择自身感觉舒适的档位使用。
请逐步调节档位。否则可能会引起事故或受伤。



禁止



务必遵守

- 使用时需留意查看皮肤是否出现异常情况。
使用中如感觉肌肤疲劳, 及使用出现异常时, 请立即停止使用。
如感觉肌肤不适, 请停止使用。次日若情况仍未好转, 请立即咨询医生。
 - 正进行牙齿治疗、或补过牙的人士刺激感过强时, 请调低档位, 调整使用部位。
EMS对脸颊、下巴有较强烈的刺激, 如若感到不适请立即停止使用并咨询专业医师。
 - 同一部位请避免持续使用3分钟以上。
同一部位再次使用, 需要间隔24小时以上。
过度使用会造成肌肤损伤。请根据肌肤状态使用。
-
- 发生停电时, 请立即关闭电源, 并将电源插头从插座上拔下。
可能会引起事故。



务必遵守



拔下插头

海外使用注意事项

警告

- 务必使用100~240V交流电压。
会造成火灾、触电或故障。



务必遵守

- 请确认插头、电压情况后在使用。
会引起发热、着火或故障。




着火注意

- 有时因地区、住宿地不同，插头形状、电压也稍有不同。请务必确认后使用。
- 关于插头转换器请咨询经销商。


各个部位的名称与功能

主机

● 正面

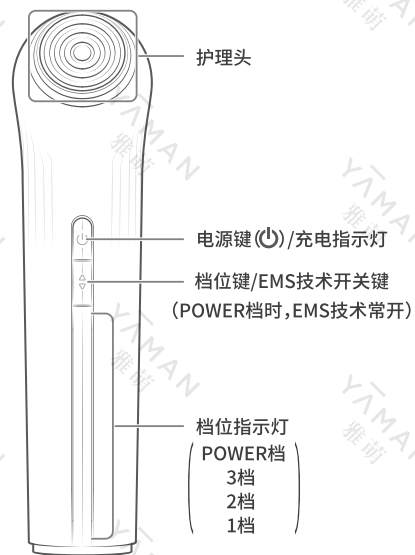

● 背面

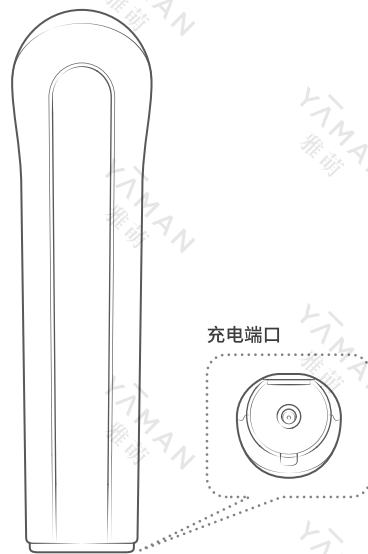

配件

● 电源适配器

● 凝胶

● 使用说明书

功能

安全功能

- 温度传感器
当检测到肌肤或护理头的温度较高时,为安全起见,主机会自动降低输出功率。
当温度仍然过高时,为安全起见,电源会自动关闭(护理头红光闪烁5次,并伴有“哔哔哔哔哔”5次提示声)。
此时,请停止使用本机30分钟以上。
- 电流传感器
检测护理头的电流值,控制电流的异常输出。
- 动作传感器
检测主机的动作。当检测出护理头持续长时间贴于同一部位使用时,为安全起见,机器将自动停止运行。
护理头于脸部滑动速度过慢时,有可能会触发动作感应器而自动降低输出功率,温热感减弱。

定时·待机功能

选用1档~3档之间档位进行护理时,全脸推荐使用时间约为6分钟;单独使用POWER档时,推荐使用时间约为10分钟。当选用1档~3档档位护理脸部、半脸护理时间约到三分钟后,会响起“哔”的一声提示声,或选用POWER档护理、各个部位的护理时间达到时,会响起“哔哔”两声提示声。此时,RF以及EMS暂停输出,进入待机状态。

进入待机状态后,电源键(⏻)指示灯以及档位显示灯闪烁,若准备好可进入下一阶段护理时,短按电源键(⏻)即可进入正常护理状态。

自动关机

使用1档~3档护理全脸后或启动POWER档5分钟没有操作,会响起「哔哔」提示声,主机自动关机。

充电显示

本机会通过电源键的充电指示灯的颜色(白、橙、红)表示残余电量状态。

若开机电量不足时,充电指示灯闪烁,并响起“哔”的提示声。

电池的电量会因电池的状态以及充电环境而有差异。


自动记忆机能

护理结束后,会自动记录电源关闭时的护理档位以及EMS的关闭状态;再次开机时,会自动进入默认的设置。

使用前

充电

请使用原装的电源适配器,适用AD-Q090C200适配器。

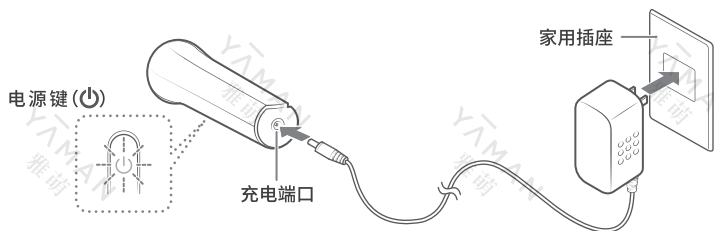

通过电源键(⏻)的充电指示灯,
可确认预计的残余电量。

残余电量显示	
白灯	电量充足。
黄灯	电量变少。
红灯 闪烁	请充电。 或连接电源适配器使用。

- 充电时,电源键(⏻)的充电指示灯闪烁。
- 充满电后,电源键(⏻)的充电指示灯闪烁5次后熄灭。此时,可拔出电源适配器。
- 25°C室温状态下充电时,充满电约需3小时。满电状态下,约可使用30分钟。

因电池的剩余电量、电池损耗以及充电环境的差异,充电时间以及使用时间也会有差异。

※插上电源10秒后若仍未开始充电时,请确认电源适配器的插孔是否完全插入到充电端口内。

注意

- 本机并非防水设计。主机以及充电端口沾有水渍时,请充分擦干。若在残留水渍情况下进行充电或保管,可能会导致主机故障。
- 长期未使用而需要再次使用时,请先确认产品是否正常。否则可能会导致人体受伤或主机故障。
- 购买后请先充电。务必完全充满电后再使用。
- 初次使用或长时间未使用时,即使显示处于满电状态,也有可能仅能使用较短时间。此时,请先充满电后再使用。
- 请勿直立充电。

肌肤适应性测试

第一次使用时,请务必先进行肌肤适应性测试。

⚠ 注意

- 为防止发生肌肤问题,请务必先进行肌肤适用性测试。
- 测试部位出现起疹、发红、瘙痒、刺激等异常情况时,请立即停止使用。
- 使用过程中,务必留意肌肤是否出现异常,若出现异常,请勿使用。
- 使用时,请先摘下身上佩戴的金属装饰(手表、项链、戒指、耳环等)。否则可能会导致人体受伤或主机故障。
- 推荐使用环境温度: 10°C~40°C。

1

用肥皂等产品清洁手臂内侧,然后用毛巾擦拭干净。



2

将适量的凝胶挤到护理头中央,将护理头贴于清洁过后的部位滑动使用3分钟(P.13)。务必使用1档进行测试。

握法以及护理头与肌肤贴合的角度



如图所示,请手握主机,将护理头完全贴于肌肤上滑动使用。

• 请务必确保护理头完全贴于脸部。使用时,一边滑动一边使用。

3

将多余的凝胶按摩至吸收,然后确认肌肤是否出现异常。如果24小时内肌肤没有泛红或发烫等异常情况,即可正常使用本机。

使用方法

基本使用方法


注意

脸部使用时,请先卸妆、洁面后再使用。
带妆使用时,可能导致皮肤变黑、变脏。

1

开机。

长按电源键(⏻)约1秒开机。充电指示灯、档位键的指示灯、护理头红色LED灯亮起。射频、EMS技术开始输出。

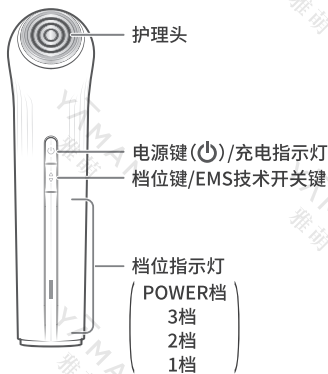

2

选择档位。

短按档位键切换档位。(1档→2档→3档→POWER档→1档→2档...)
可通过档位指示灯亮起状态确认当前护理档位。



EMS开/关的切换

长按档位键进行EMS技术的开启与关闭。(档位键灯亮:EMS开;档位键灯不亮:EMS关)
※POWER档时,无法关闭EMS技术。

注意

初次使用或未适应时,请务必从1档开始使用。

3

将适量的凝胶挤到护理头中央，将护理头贴于肌肤上滑动使用。

请依据使用时的体感，适当增加凝胶用量。



注意

- 请勿用手涂抹凝胶，以保持凝胶洁净或避免手滑而引起主机滑落。
- 为保持护理头与肌肤之间的水分充足，使用过程中请适当补充凝胶。水分不足时，可能导致刺激的传导异常，从而产生肌肤问题。
- 使用过程中，护理头滑动不顺畅时，请适当补充凝胶。
- 务必确保护理头完全与肌肤接触后再使用。
- 温感过强时，可适当加快滑动速度或者调低档位使用。
- 每次使用后，请务必清洁干净本机与肌肤接触的部位。否则可能会导致肌肤问题。

4

使用后肌肤的保养。

标配凝胶为免洗凝胶，护理后可依据个人使用习惯以及皮肤状态，选择是否清洗。一般建议护理后用清水清洗干净后再进行日常肌肤护理保养。

每次使用后，参考“使用后”的保养方法，充分擦拭干净附在产品上的油脂、脏污、残留凝胶。

否则可能会导致主机故障、产生肌肤问题。

使用方法请参考
“护理方法”(P.13~P.14)




- 肌肤表面有“针刺”刺痛感时，可调低档位或避开该部位使用；或者也可适当增加凝胶的用量，保持肌肤与护理头之间的湿润度。
- 请勿在喉部、眼球、上眼睑等眼眶内区域使用（禁用部位请参考右图）。
- 请勿在开机状态下、护理头涂抹上凝胶放置。



1档~3档的护理方法

如图所示、按照①~③的顺序如箭头指示方向滑动使用。每个箭头动作重复3次。同样的方法，护理另外一边脸。

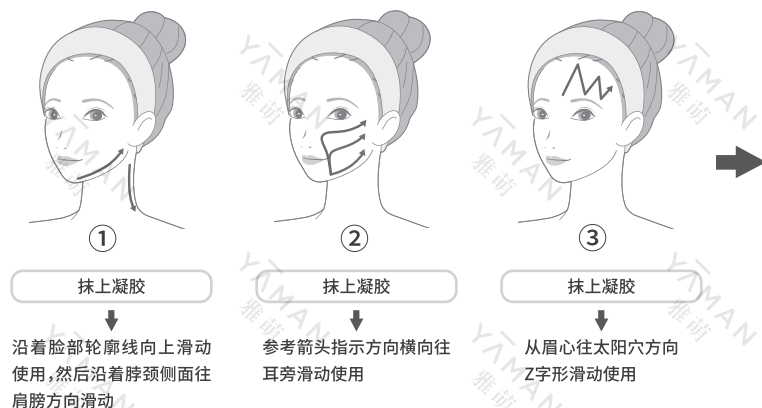

半脸 约3分钟


- 主机滑动的速度参考: 4cm/秒。
- 建议使用时间: 6分钟(全脸)。
- 3分钟后响起“哔~”的提示声,主机停止运行,进入待机状态。准备好进入另外半脸使用时,短按电源键(⏻)。
- 中途停止使用时,请按电源键(⏻)1秒以上,关机。



POWER档的护理方法

如图所示,参考①~④的顺序,按照箭头的指示方向滑动使用。同一方法,护理另外一边脸。

※POWER档护理时,不同的护理部位其技术输出有差异。

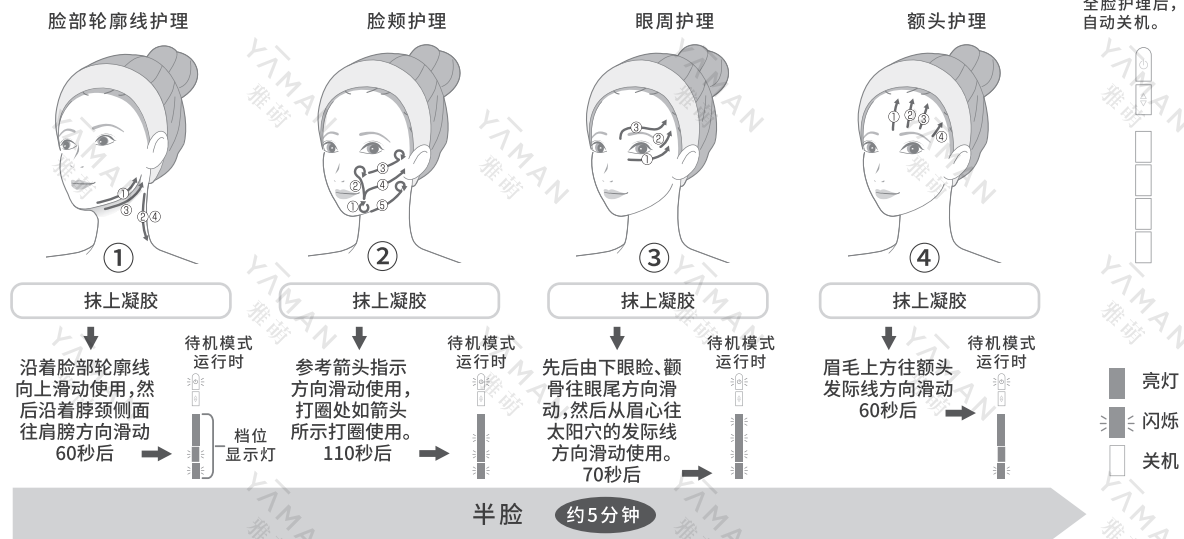

- 主机滑动的速度参考: 4cm/秒。
- 建议使用时间: 10分钟(全脸)。
- 达到一定时间后主机停止运行,进入待机状态。准备好进入下一部位护理时,短按电源键(⏻)。
- 中途停止使用时,请按电源键(⏻)1秒以上,关机。

使用后

保养方法

为保持主机与肌肤接触部位的洁净,每次使用后,务必进行主机的清洁。
否则可能会引起肌肤问题。

1

保养时,务必先切断电源,从主机上拔出电源适配器。

否则可能会导致触电、短路、起火。

2


用拧干了的柔软的布擦拭干净护理头上的污渍。

- 顽固污渍难以清洁时,请用布蘸上稀释过的中性洗涤剂轻轻擦拭。
- 护理头电极间上残留有凝胶,可用棉签或化妆棉擦拭干净。



警告

- 请勿用水冲洗本机。
本机非防水产品,会引起主机故障。

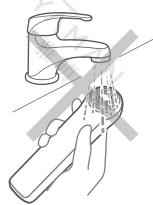

注意

- 请勿在沾有凝胶状态下放置。
- 请勿使用酒精、稀释剂、汽油、卸甲液等溶剂及药品,或具有打磨效果的研磨剂擦拭本机。
会导致本机表面破损。



保管方法

- 请保管在儿童接触不到、通风干净的地方。
- 长期不使用时,请从主机以及家用插座上拔出电源适配器后再保管。
- 请勿放置在高温高湿(火旁、烈日下、浴室等)的地方。

保养与检查

- 长时间不使用需要再次使用时,请先确认主机是否处于正常操作状态。否则可能会引发事故、主机故障。
- 本机出现操作异常时,送修前可先参照“疑似故障”(P.17~P.18)的内容,排查故障。若故障仍无法排除时,请准备好购买凭证,咨询经销商或雅萌中国官方总代理客户服务热线(P.21)。

须知

疑似故障

使用本产品过程中如有异常,送检维修前可先确认以下项目。

状况	可能原因和排除故障的方法
无法开机	长按电源键(⏻)约1秒。
	电量不足,请充电(P.9)。
自动关机	进入待机状态、或激发了自动关机功能(P.8)。 短按电源键(⏻)、启动功能(待机状态)。 进入待机状态5分钟后,主机自动关机。 长期置于低温环境,主机自动关机。建议将主机放在推荐使用环境温度(10°C~40°C)下,确认充电状态后,再长按电源键(⏻),开机。
即时充满电也只能使用几分钟	护理时间约到6分钟(1档~3档时)或约到10分钟(Power档时)后,自动关机。
	电量不足,请充电(P.9)。
	电池寿命问题。请联系经销商或中国总代理服务热线(P.21)。
无法充电	低温环境下,可能会突然关机。请插电使用。
	将电源适配器完全插入到充电端口内(P.9)。请确认充电端口没有松动。
射频温感过热	将电源适配器完全插入到家用插座上(P.9)。
	长时间贴于同一地方使用。务必滑动使用。
	稍微加快滑动速度。
	降低档位使用。初次使用时,务必使用档位1。

状况	可能原因和排除故障的方法
没有射频温感	肌肤干燥。请适当增加凝胶,保持肌肤的湿润度。
	调高档位。
	使用1档~3档、半脸使用时间约到3分钟或POWER档达到一定时间后,RF以及EMS会暂停输出,进入待机状态。此时,短按电源键(⏻)启动即可。
电流刺痛感	调低档位。初次使用时,务必使用1档。
	务必确保护理头完全与肌肤接触。
EMS体感弱、没有体感	调高档位。
	肌肤干燥。请适当增加凝胶,保持肌肤的湿润度。
	面部肌肉的感知状态不同,也有难以感受到刺激的肌肉。
	未开启EMS功能。长按档位键,开启EMS功能(P.11)。(POWER档时,EMS功能处于常开状态)
	使用1档~3档、半脸使用时间约达3分钟或POWER档达到一定时间后,RF以及EMS会暂停输出,进入待机状态。此时,短按电源键(⏻)启动即可。
充电指示灯亮红灯	参考电量显示(P.9)。
无法从1档开始使用	自动记忆功能(P.8)。

常见问题

Q 推荐使用频率以及时间

A

推荐每周使用5次(1档~3档单次使用时间约为6分钟;POWER档单次使用时间约为10分钟)。

※依据皮肤状态,调整使用次数。

※使用时,务必注意肌肤是否出现异常。如有异常,暂停使用。

Q 可连续使用次数

A

推荐每天使用1次(1档~3档单次使用时间约为6分钟;POWER档单次使用时间约为10分钟)。

Q 单次使用凝胶的用量

A

参考P.12的示意图用量。

如若觉得凝胶不足时,可随时适当增加。

Q 是否可以浴室使用

A

本产品非防水结构,请勿在浴室使用。

Q 使用后肌肤发烫

A

射频的温热效应引起的。

Q 护理头没有温热感

A

射频不会加热护理头,而是通过热效应实现肌肤的深层温热。

Q 调高档位有何变化

A

档位越高,EMS体感以及射频温热感会更强。

※初次使用或未适应时,请使用1档。

Q 可否用水冲洗

A

本产品非防水结构,请勿用水冲洗。否则会导致主机故障。

产品规格

额 定 输 入	DC9V 2.0A(主机)
使 用 电 池	锂离子充电电池
充 电 时 间	约3小时 ※充电环境不同,充电时间有差异。
使 用 时 间	约30分钟(满电状态) ※使用环境不同,可使用时间有差异。
外 观 尺 寸	约W47×D47×H181(mm)
产 品 重 量	约180g
材 质	主机: ABS树脂、聚碳酸酯 护理头: PET树脂、不锈钢
产 地	日本
配 件	电源适配器1个 凝胶1支 使用说明书
推荐环境温度	10°C~40°C

售后服务

充电电池

- 充电电池为消耗品(不在质保范围内)。
- 充电后使用时间极短时,可考虑电池寿命问题(充电次数大约是300次)。
- 需要更换充电电池时,请咨询经销商或中国总代理客户服务热线(P.21)。

关于废弃

- 废弃本产品时,请依照当地法律规定进行废弃。
- 本产品使用锂离子电池。



客户服务热线

有关本产品的质保和维修等,如有不明之处,请咨询一下客户服务热线。

碧捷(广东)洁净科技有限公司

地址: 广东省佛山市顺德区盈峰中心
客户服务中心: 400-931-8556

关于内置充电电池的废弃

本机使用锂离子电池，请根据当地相关规定进行废弃。


- 本机内置充电电池，废弃前务必先取出。
- 拆卸电池时，请关闭电源，拔出插头。
- 拆卸电池时，需要使用螺丝刀，请注意安全避免受伤。
- 拆卸电池时，请避免硬物划伤电池。※可能会引起电池发热、着火等。
- 拆卸下来的电池请移交相关的回收组织进行处理。
- 拆卸下来的电池，请遵循当地政策（废弃及回收办法）进行处理。

操作步骤


参考下图1~4的步骤拆卸电池。

- 1 使用一字螺丝刀等前端尖细的工具，拆掉背板。


※由强力胶粘贴附着。

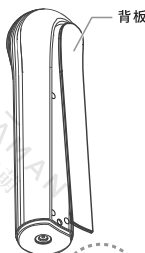

- 2 拆出下壳4处螺钉，将上壳和下壳分开，并将连接线和连接器拆下。

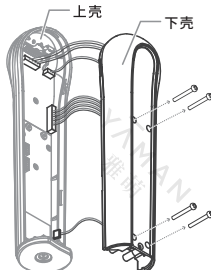


- 3 拆掉电池3处螺钉后，取出电池。

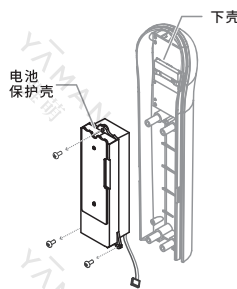

- 4 用塑料尺等细薄的物体将电池从电池保护壳内取出。

※由强力胶粘贴附着。

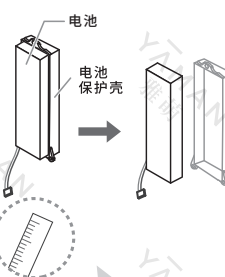

⚠ 请注意避免电池损伤。



本操作指引仅适用于废弃主机，不能用于正常的产品维修。
若自行拆卸导致主机的故障，请恕无法提供正常的售后服务。

关于有害物质或元素的说明

部件名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电源适配器	×	○	○	○	○	○
电线	○	○	○	○	○	○
PCB	×	○	○	○	○	○
电池	○	○	○	○	○	○
控制面板	○	○	○	○	○	○
塑料件	○	○	○	○	○	○
五金件	○	○	○	○	○	○

○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。
 ×:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。但是上述打“×”的部件,符合欧盟RoHS法规要求(属于豁免的部分)。



环保使用期限
 此标识指期限(十年),电子产品中含有的有毒有害物质或元素在正常的条件下不会发生外漏或突变,用户使用该电子产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。

关于保修

- 正常使用过程中如出现故障,自购买当日起1年内保修(耗材除外)。
- 另外,超过保修期后,寄送产品的运输费用由用户自行承担。
- 超过保修期后发生的故障,按实际维修费用收取。
- 保修期内的维修也可能产生费用,请仔细阅读免费维修规定的说明。
- 万一发生故障,请联系经销商或雅萌中国官方总代理客户服务热线(P.21)。

免费维修的相关规定

1. 根据使用说明书及本产品上所贴的标签上的相关内容进行。使用时所出现的故障,可携带本产品前往购买本产品的经销商处接受免费维修。
2. 保修期间,产品发生故障并需要接受免费维修时,请携带本产品及其保修卡前往购买本产品的经销商处接受免费维修。
3. 住址搬迁时,请提前与购买本产品的经销商联系。
4. 如将本产品送作他人使用而导致本产品无法接受本说明书中所记载经销商的免费维修时,请联系雅萌中国官方总代理客户服务热线(P.21)
5. 保修期间,以下情况不属于无偿保修的对象范围。
 - (1) 使用不当或不当的维修及改造所造成的故障及损伤。
 - (2) 购买后,因使用过程中致使本品倾倒、跌落等造成的故障及损伤。
 - (3) 因火灾、地震、水灾及其他自然灾害、公害或电压异常等造成的故障及损伤。
 - (4) 因与本产品连接的其他电器设备的异常所造成的故障及损伤。
 - (5) 电池及消耗品等零部件更换时。
 - (6) 非一般家用情况(例如:需长时间使用的商用情况)使用时,造成的故障及损伤。
 - (7) 装载在车辆或船舶等使用时造成的故障及损伤。
 - (8) 购买后,因运输、移动及跌落等所造成的故障及损伤。
 - (9) 本保修卡中所规定的范围以外的情况。
 - (10) 本保修卡的必填栏中未填写购买年月日、客户姓名、经销商等信息或没有经销商盖章,以及填写信息被改动过时。

※本保修卡对免费维修的时间及条件进行了一定约束,但并非是对客户在法律上应享有的权利进行限制。如对过了保修期的修理尚有不明之处,可向购买本产品的经销商咨询。

※因自然使用所导致的本品性能劣化、消耗及消耗品的更换属于无偿保修对象范围外。

※保修地域仅限中国大陆地区。

No. _____

保修卡

凭卡修理

品 类	RF射频美容仪	型 号	YJFS16
名 称	Bloom 5		
保 修	对 象	时 间	
	主 机	自 购 买 本 产 品 当 日 起 1 年 内	
※ 经 销 商	门店名称 / 地址 / 联系电话 请贴上标有购买日期的 明细或者将其与本质保书 一起保管。		

请经销商将带有※的必填栏填写完毕相关的信息,然后交回客户保管。

本保修卡承诺根据记录的内容免费维修。
左列“免费保修期”内发生故障时,请您携带本产品及保修卡
前往购买本产品的经销商进行维修。

- 如果本卡的空白栏中没有按规定填上购买日期或没有购买
明细,则此保修卡无效。
- 本保修卡不接受补办,请妥善保管。

制造商

ヤーマン株式会社

邮编: 135-0045 东京都江东区古石场1-4-4
日本官网: <https://www.ya-man.com>



日本官网

中国总代理

碧捷(广东)洁净科技有限公司

地址: 广东省佛山市顺德区盈峰中心
客户服务中心: 400-931-8556
中国官网: <https://www.ya-manchina.com/>