

YAMAN

TOKYO JAPAN

使用说明书

家用美容仪
速效焕颜仪
YJFD4 系列
V3.0

前言

非常感谢您购买雅萌产品。

- 使用前,请仔细阅读“安全注意事项”(P.1~P.4)。
- 为确保正确、安全使用,请仔细阅读使用说明书。
- 阅读后,请务必保管在能够随时取阅的场所。
- 将本产品转让给他人时,请务必附带使用说明书。

目录

安全注意事项	01
各部位的名称及功能	06
使用前	07
使用方法	09
使用后	12
须知	13
● 疑似故障	13
● 常见问题	14
● 产品规格	14
售后服务	15

使用注意事项与安全警告

警告：如果不遵循使用说明，可能导致不良影响。

警告：延长或重复在一个表面部位使用本器具，可能导致对皮肤潜在的损害。

警告：不要避开或取消器具固有的安全装置。

警告：请勿在浴缸、淋浴或注满水的蓄水池中使用。



- 器具不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人(包括儿童)使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导。
应照看好儿童，确保他们不玩耍本器具。
- 本器具包含只能由技术人员更换的电池。
- 使用本器具，可能对患有皮肤病及皮肤炎症的人群、敏感性肌肤人群及具有过敏性体质人群产生不适或不良影响。如使用时产生任何不适，立即停止使用本器具。
- 不应在皮肤完整性损坏的部位使用本器具(例如有灼伤、病灶、水泡、切口、伤口、活动性皮肤病或感染)。
- 带有与器具不相容的植入物的人不应使用本器具。
- 年龄小于或等于14岁的人不应使用本器具。
- 器具不适合作用于人体的特定部位如眼睛和生殖器等。
- 在将电极放至或移出皮肤之前，先关断器具的输出。
- 不要将器具与易燃化妆品一起使用。
- 使用器具时不要靠近使用者的眼睛。
- 不要在体内植有电子设备(如心脏起搏器)的人身上使用本器具。
- 不要在靠近心脏区域使用本器具。

■ 温馨提示

- 使用前，请务必认真阅读所有的“安全注意事项”。
- 请按照规定步骤合理使用。
- 发生异常时，请立即停止使用并联系当地的经销商进行维修。
- 如果在故障状态下使用，可能会对身体产生不良影响，请务必注意。
- 此处的注意事项写明了与安全有关的重要内容，请务必遵守。

■ 禁用及慎用提示

正在使用以下医用电子仪器人员，请勿使用本产品，否则可能会导致医用电子仪器发生故障，容易引发事故导致皮肤及身体问题：

- 心脏起搏器等体内植入式医用电子仪器
- 人造心肺机等维持生命用医用电子仪器
- 心电图描写器等穿戴型医用电子仪器

具有以下情况人群，请勿使用，否则容易引发事故导致皮肤及身体问题：

- 心脏疾病患者、心脏功能障碍或者具有功能障碍倾向的患者
- 儿童或无法表达自己意识的人群
- 无法感知温度以及刺激的人群
- 具有自身免疫性疾病患者
- 黑皮病 ● 癫痫患者 ● 光过敏患者
- 因接受光动力疗法而正在使用光敏药物的人群
- 使用本产品部位上患有疾病的人 ● 骨折的人

以下人群请慎重使用，使用前请咨询专业的医生：

- 急性病患者 ● 传染病患者 ● 恶性肿瘤 ● 发热或体温异常者 ● 高血压患者和血液病患者
- 患有糖尿病等高度末梢循环障碍引起的感知障碍的人 ● 神经障碍患者
- 皮肤病和特应性皮炎患者 ● 正在接受门诊治疗并服用药物的人
- 过敏体质、接触性皮炎、有皮肤病史或者使用本产品时肌肤感到不适的人

以下情况及部位请勿使用，否则容易引发事故导致皮肤及身体问题：

- 皮肤出现受损、皮疹、炎症、瘙痒等异常时
- 酒后人群 ● 头部 ● 口腔内、阴部、粘膜处等
- 眼球 ● 上眼睑（眼窝） ● 下眼睑、眼尾（除眼周外） ● 喉咙 ● 病理性色素部位
- 病毒性疣 ● 骨折部位
- 外科手术（形成、整形、美容）等体内接受过金属植入等外科手术部位
- 接受美容外科手术仍在恢复期的部位（如出血、肿胀、结痂等）
※接受手术后2周请谨慎使用，请先咨询专业医生的意见。
(手术示例：玻尿酸注射、硅胶填充、肉毒杆菌素、埋线提拉、双眼皮整形、超声刀等)

■ 关于使用与保管

- 本器具适用于海拔2000米以下地区安全使用。
- 请勿在皮肤较薄或接近骨头的部位长时间使用，否则可能会引起肌肤损伤或人体受伤。
- 请勿过度使用，请严格按照操作说明书规定的使用时间以及使用频率进行护理，否则可能会对身体产生危害。
- 使用前请确认本体是否有破裂、变形、破损、故障等情况，如有以上情况请勿使用，否则可能会引起肌肤损伤或人体受伤。
- 请勿用于使用说明书中注明以外的用途，否则可能会引起主机故障或人体受伤。
- 未成年人请在征得监护人同意并在陪同下使用，否则可能会引起事故或人体受伤。
- 请勿大力按压或集中在一个部位使用，过度大力按压或集中在一个部位使用可能会引起肌肤损伤。
- 初次使用或未适应之前，请务必从1档开始使用。请选择适合自身的档位使用，请勿勉强调高档位，否则可能会引发人体受伤或事故。
- 使用时，请注意肌肤是否有异常。如若使用中感到疼痛、疲劳或肌肤异常，请立即停止使用。次日若情况仍未好转，请咨询专业医生。
- 请勿在下列情况下使用、保管或给主机充电，否则可能会引起故障、引发事故或人体受伤。
 - 灰尘较多的场所 · 阳光直射的场所或室外 · 容易倾斜、震动、被撞击的场所
 - 有强电波或磁场的场所
 - 易燃性物品附近（酒精、稀释剂、汽油、卸甲水、定型喷雾等）
 - 有油烟、水蒸气的场所
 - 发热器具（炉子等）周围等高温场所
 - 温度变化较大的场所（空调、暖气设备等的旁边）
- 请勿在通电状态下放置本机，否则可能会引发事故或起火。

拔出USB充电线时，请务必手持插头前端拔出（不接触金属部位）。另外，请勿用沾湿的双手进行操作，否则可能会引发短路、触电或起火。
- 地震或打雷的情况下，请关闭电源、拔出插头，否则可能会引起触电或起火。
- 不使用或进行主机保养时，请务必关闭电源，充电结束后，从主机上拔出充电线。
- 请将本体、充电线放置于儿童接触不到的地方，请勿让儿童单独使用或玩耍，否则可能会引起事故或人体受伤。
- 请将本体、充电线放置于儿童接触不到的地方，请勿让儿童单独使用或玩耍，否则可能会引起事故或人体受伤。
- 本机内置充电电池，请勿将本产品投入火中以及在加热、高温、高压的环境下充电、使用和放置本机，否则会引起主机发热、破损或起火。


- 请勿拆解、修理、改造主机。否则可能造成触电、人体受伤或起火。维修事宜请咨询当地经销商或中国总代理 (P.15)。
- 如有机器摔落、破损等情况, 请立即关闭电源、拔出插头, 并联系当地经销商或中国总代理。否则可能会引起触电或起火。
- 开机状态下请勿与其他美容仪器或电器产品接触。请勿与其他的电器产品 (电热毯、电暖桌等) 同时使用。否则可能会引起事故。
- 请勿在车辆行驶过程中使用, 否则可能会引起事故或人体受伤。
- 请勿用水龙头等强水压冲洗或将本机泡入水中, 本产品无法应对强水压的水流冲洗及浸泡, 在浴室、厨房等高温高湿场所使用时, 请务必注意, 否则可能会引起本机故障。
- 正在接受牙齿治疗的人士, 请调低档位使用或调整使用部位。正进行牙齿治疗、或补过牙的可能会因EMS的刺激, 导致牙齿不适。若出现明显的不适感, 请咨询专业医生。
- 请避免在同一部位持续使用超过建议使用时间, 过度使用可能会引起肌肤损伤, 请根据肌肤的实际状态合理使用。
- 本设备包含型号核准代码为: CMIIT ID: 2022DP11232 的无线电发射模块。

■ 关于电源

- 务必使用专用的 USB 充电线, 否则可能会引起短路、触电或起火。
- USB 充电线有损伤或松动时, 请停止使用, 否则可能会引起短路、本体故障、触电或起火, 维修事宜请咨询当地经销商或中国总代理。
- 请勿连接超出插座或连线设备额定容量的排线 (排插), 否则可能会引起短路、主机故障、触电或起火。
- 请勿损坏、加工、用力弯折、过度捆扎 USB 充电线, 否则可能会引起电线损坏、触电或起火等, 收纳时请解开充电线上的绳结。
- 请务必使用直流 5V 的 USB 电源, 否则可能会引起触电、起火或事故。

产品结构及作用原理

- 本产品为家用美容小家电，并非医疗器械产品。
- 产品结构及作用原理如下：

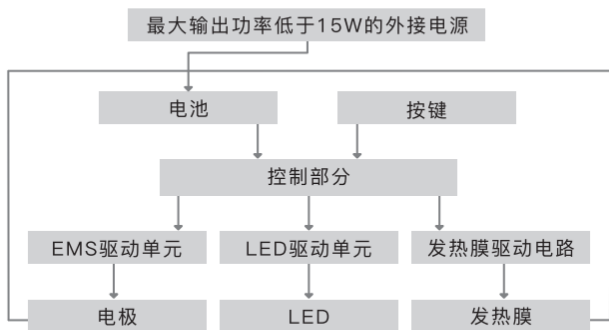


作用原理:通过EMS、LED、热敷对肌肤进行护理,搭配护肤品,协同达到美容效果。

各部位的名称及功能


本体

● 正面

(电极总面积约为: 2209mm²)

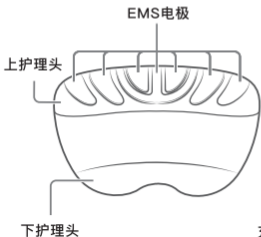

● 背面

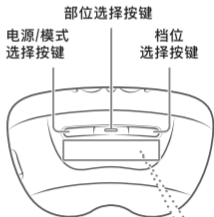

配件

- USB充电线(USB Type C)
- 使用说明书

主机、配件的设计和规格如有改变,将不作另行通知。

功能

自动关机

待机状态下,如若5分钟内无任何操作,自动关机。

防水性能

本产品无法应对强水压的水流冲洗及浸泡;此外,在浴室、厨房等高温高湿场所使用时,也请务必注意。

使用前

使用注意事项

使用前,请认真阅读以下内容,正确使用本产品。


- 请务必先卸妆。
- 带妆使用可能会因粉底导致肌肤变黑。
- 初次使用本产品时,请务必先进行肌肤适应性测试(P.08)。
- 请先用清水或精华、乳液、凝胶等护肤品湿润肌肤后,再将仪器贴合在肌肤上使用。

充电

使用充电宝充电



使用电脑充电

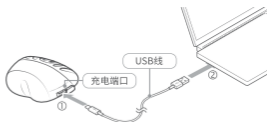

- 主机插上USB充电线开始充电。
充电过程中,充电/剩余电量指示灯,从左至右依次由闪烁变为常亮。
- 充电完成后,充电/剩余电量指示灯会全部熄灭。
- 在室温约25℃的情况下,约需3.5小时充满电,运行时间约30分钟。
因充电环境、残余电量等的差异,充电时间及运行时间也稍有不同。

充电时间	运行时间
约3.5小时	约30分钟

注意

- USB充电线及充电端口沾有水渍时,请充分擦干。若在残留水渍的情况下进行充电或保管可能会导致主机故障。
- 购入后初次充电时,请充满后再使用。
- 初次使用或长时间未使用时,即使显示满电可能也只能使用较短时间,请充电后再次使用。
- 为防止电池过放,若产品长时间未使用,建议每3个月对产品进行一次充电。
- 产品本身的功率不到15W,为了保障使用安全,建议您使用最大输出功率小于15W的外接电源(如充电宝)来充电,使用过高的功率(超过15W)可能对美容仪造成损害或存在安全隐患。

● 充电电量指示灯



- 充电过程中,充电/剩余电量指示灯,从左至右依次由闪烁变为常亮。
- 充电完成后,充电/剩余电量指示灯会全部熄灭。

● 剩余电量指示灯

○ = 亮灯 ● = 熄灭

剩余电量	左	中	右
充足	○	○	○
中等	○	○	●
较低	○(红色)	●	●

※电量不足时,主机将响起“滴滴滴”提示音,此时主机将自动关机。

肌肤适应性测试

※初次使用时,请务必进行肌肤适应性测试。

- 1 清洁手臂内侧,然后用毛巾擦拭干净
- 2 在手臂内侧涂上护肤品(爽肤水、精华液)或清水,开启【DAILY】模式的FACE护理,使用3分钟(P.11)
请务必使用档位1进行测试。
- 3 确认肌肤无异常
确认24小时内,测试部位是否有异常(发红或发烫)。



注意

- 为防止出现肌肤问题,使用前请务必先进行肌肤适应性测试。
- 若测试部位出现红疹、发红、瘙痒、感到刺激等异常时请立即停止使用,并用清水冲洗该部位。
- 感到肌肤异常时,请勿使用。

使用方法

基本使用方法

请配合保湿、抗皱、紧致、美白、祛痘等护肤品使用，使用时需确保肌肤足够湿润。

※在干燥的皮肤上使用EMS的体感会变弱。

1 开启电源

长按电源 / 模式选择按键约 1 秒，响起“滴滴”提示音，开机；

【模式显示灯 (DAILY)】闪烁，目前处于待机状态；

※为确保安全，首次开启电源时档位为 1 档。



2 选择使用部位

短按部位选择按键，若在面部使用请选择FACE，若在眼周使用请选择EYE。

※仅在【DAILY】模式和【AGING】模式下，可选择使用部位。



3 选择档位

短按档位选择按键，选择 1~3 档 EMS 强度（只有在【DAILY】模式、【AGING】模式时可选择）。

※刚开始使用时，请务必从档位 1 开始。



4 启动与切换模式

短按电源/模式选择按键，响起“滴”提示音，【模式显示灯 (DAILY)】常亮，进入DAILY模式护理；

再短按电源/模式选择按键，即可进行模式切换；

模式会按照DAILY→AGING→ACNE→DAILY→AGING...的顺序循环切换。

5 贴肤使用

将护理头贴于皮肤上滑动或盖章使用。

各部位的使用手法请参照「各部位的使用手法」(P.11)和雅萌小程序。

※请勿过度用力按压皮肤,可能会导致肌肤问题。



6 关闭电源

模式结束后,仪器响起“滴滴”声,产品进入待机状态;

长按电源/模式选择按键约2秒,仪器关机。

注意

- 若待机状态下无任何操作,约5分钟后电源自动关闭。
- 使用时,感到疲劳或肌肤发生异常,请立即停止使用。次日若情况仍未好转,请咨询专业医生。
- 请勿在同一部位使用超过所规定的使用时间。

模式介绍



- [DAILY]模式、[AGING]模式中,EMS强度有1~3档可供选择。
- [DAILY]模式FACE、EYE部位的工作时长约为3分钟、1.5分钟。
- [AGING]模式FACE、EYE部位的工作时长约为5分钟、2分钟。
- [ACNE]模式的工作时长约为2分钟。
- 使用[DAILY]模式、[AGING]模式时请使用上护理头。使用[ACNE]模式时请使用下护理头。

模式名	部位	护理头	LED
DAILY	FACE 脸部	上	绿光
	EYE 眼部		
AGING	FACE 脸部	上	红光
	EYE 眼部		
ACNE	—	下	蓝光、红光

各部位使用手法

脸部护理

模式：「DAILY」模式或「AGING」模式

按照①~⑧的顺序，沿下图箭头指示方向滑动。

搭配建议：DAILY模式建议搭配美白祛斑、抗皱、紧致类护肤品使用；AGING模式建议搭配抗皱、紧致类护肤品使用。




模式：「ACNE」模式

在容易出油或长痘的部位轻压⇒移动⇒轻压...循环使用。

搭配建议：ACNE模式建议搭配控油祛痘类护肤品使用。



 不能使用的部位

注意


- EMS有可能会刺激牙齿神经。使用时，如感不适，可调低档位或避开该部位使用。正在接受牙齿治疗或补牙的人群务必注意。
- 护理颈部时，可能会感到EMS的刺激感很强，此时可调低档位使用。

眼部护理

模式：「DAILY」模式或「AGING」模式

从眼角下方开始，往眼尾方向移动。



 不能使用的部位

使用后

保养方法



警告

- 保养时务必先关闭电源,否则可能会导致短路、触电或起火。
- 为使仪器保持清洁,每次使用后请务必进行清洁。
- 用干的软布擦拭干净仪器上的污渍和水分。
- 请放在通风良好的位置进行风干,在留有水分及污渍的情况下存放本机,可能会导致故障或异味。
- 请勿用水冲洗。
- 请勿使用碱性清洁剂、酒精、稀释剂、汽油、卸甲油等溶剂及药品或具有研磨效果的研磨试剂擦拭仪器。

保管方法

- 使用后请务必擦干主机上的水分,沾有水份的情况下保存,可能会导致主机内部被水侵蚀。
- 长期不使用时,请清洁保养后再保管。
- 不使用时,请先关机,然后从主机上拔出电源线。
- 请勿放置在高温高湿(火旁、烈日下、浴室等)的地方。
- 请保管在儿童接触不到、通风、干净的地方。

保养与检查

- 长时间不使用需要再次使用时,请先确认本机是否处于正常可操作状态。
- 本机出现异常时,送修前可先参照“疑似故障”(P.11)的内容,排查故障。若故障仍无法排除时,请准备好购买凭证,咨询当地经销商或中国总代理。
- 本机出现故障、破损等情况时,可咨询当地经销商或中国总代理。

须知

疑似故障

使用本产品的过程中如有异常，送修前可先确认以下内容。

状况	可能的原因和排除故障的方法
无法开机	● 长按电源/模式选择按键约1秒。
	● 电量不足，请充电 (P.07)。
充满电也只能使用几分钟	● 电量不足，请充电 (P.07)。
	● 电池寿命问题。请联系当地经销商或中国总代理。
无法充电	● 请正确连接USB电源线 (P.07)。
	● 请使用直流5V的USB电源进行充电 (P.07)。
电源自动关闭	● 待机状态下无任何操作约5分钟，电源自动关闭。
EMS体感强 (电流感·刺痛)	● 档位过高，请调低档位。初次使用请从档位1开始使用。

疑似故障	可能的原因及排除故障的方法
EMS体感弱	● 设定档位过低，请调高档位。
	● 本产品是脸部专用仪器，在身体上使用可能体感较弱。
	● 皮肤干燥时，请用水、乳液或凝胶润湿皮肤后使用。
EMS无体感	● 请确认使用中是否误触电源/模式选择按键。
	● 电量不足，请充电 (P.07)。
	● 皮肤干燥时，请用清水、爽肤水等润湿皮肤后使用。

常见问题

Q 推荐的使用时长

A

本产品可每天使用,推荐早上使用【DAILY】模式,晚上使用【AGING】模式。

※建议全天累计使用时长不超过30分钟。

※以上为建议使用时长,可依据皮肤状态适当调整。

※使用时务必注意肌肤是否出现异常,如有异常,暂停使用。

Q 是否可以在浴室使用

A

本产品有一定的防水功能,可在浴室或洗脸盆旁边等使用,但请勿将本产品浸泡在水里或用水龙头等强水流冲洗,会导致主机故障。

Q 是否可以在桑拿房或澡堂使用

A

在桑拿房或澡堂等高温场所使用,可能会导致烫伤,勿在桑拿房或澡堂等地方使用。

Q 可以在干燥的皮肤上使用吗

A

皮肤干燥的状态下,EMS体会变弱。如感到EMS体感偏弱,可用清水、爽肤水、精华等润湿皮肤后再使用。

Q 敏感肌可以使用吗

A

初次使用时请务必在手臂等地方做肌肤适应性测试,确认肌肤状态,如有异常,请立即停止使用。

Q 是否可以带妆使用

A

可能会因粉底等导致肌肤变黑,请卸妆后再使用。

产品规格

额定输入	5V=1A
充电方式	充电式
充电时间	约3.5小时
使用时间	约30分钟
外观尺寸	主机:约W114×D42.5×H71.5(mm)
产品重量	本体:约206g
使用电池	锂离子充电电池
产地	中国
配件	USB充电线(USB Type C) 1条 说明书 1本

售后服务

关于电池

- 充电电池是消耗品(不在质保范围内)。
- 充电后使用时间极短时,可考虑电池寿命问题(充电次数约为300次)。
- 需要更换充电电池时,请咨询经销商或中国总代理。

关于废弃

- 废弃本产品时,请依照当地法律法规进行废弃。
- 本机内置充电电池,废弃前请务必先取出。



服务热线

- 与本产品有关的不明之处,可咨询下方的客户服务热线。

中国总代理: 广东倍捷医疗科技有限公司

地址: 广东省佛山市顺德区盈峰商务中心

客户服务热线: 400-931-8556


关于内置充电电池的废弃

- 拆卸电池时,请关闭电源,拔出USB充电线。
- 拆卸电池时,需要使用螺丝刀,请注意安全避免受伤。
- 拆卸电池时,请避免硬物划伤电池。*否则可能会引起电池发热、起火等。
- 拆卸下来的电池,请遵循当地政策(废弃及回收办法)进行处理。


操作步骤

参考下图①~⑧的步骤拆卸电池。


- ① 拔下USB连接部的盖子,取出前壳。

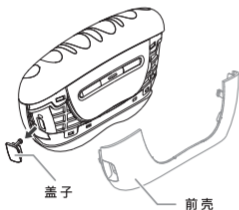

- ② 拧出4处螺钉取下显示面板以及后壳。
※前壳、后壳有强力胶固定。

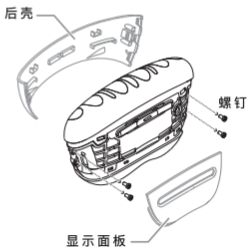

- ③ 拧出示意图两处螺钉,拆下上护理头。
※先用尖锐镊子拆卸护理头的5个卡扣。

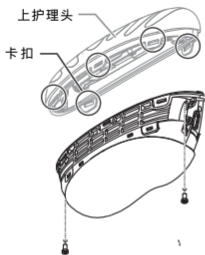


- ④ 拧出示意图2处螺钉,拆下下护理头。
※先用尖锐镊子拆卸护理头的4个卡扣。




- 本操作指引仅适用于废弃主机时的操作指引,不能用于正常的产品维修。
- 若自行拆卸导致主机故障,请恕无法提供正常的售后服务。


- 5 从上侧2处拧出螺钉。

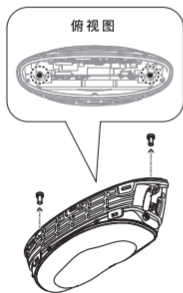

- 6 用尖细的工具拆卸下内壳的4个卡扣拆出下内壳。

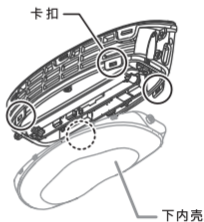


- 7 拔出充电电池输出插头,拆出电池盒。

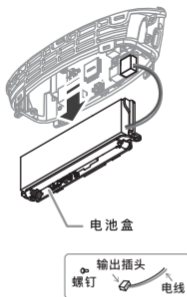

- 8 用塑料尺般厚度的工具从电池盒中卸下电池。

※充电电池被强力胶固定。

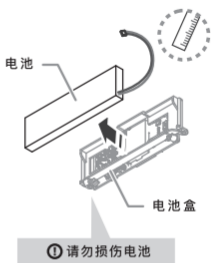

- 本操作指引仅适用于废弃主机,不能用于正常的产品维修。
- 若自行拆卸导致主机故障,请恕无法提供正常的售后服务。

产品中有害物质的名称及含有的信息表

	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBBs)	多溴二苯醚 (PBDEs)	邻苯二甲酸 二正丁酯 (DBP)	邻苯二甲酸 二异丁酯 (DIBP)	邻苯二甲酸 丁酯 (BBP)	邻苯二甲酸二 (2-乙基)己酯 (DEHP)
USB充电线	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
PCB	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电池	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
控制面板	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
塑料件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
五金件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注1：“○”表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量不超出国家关于电器电子产品有害物质限制使用的标准限值；“×”表示该有害物质在该部件某一均质材料中的含量高于国家关于电器电子产品有害物质限制使用的标准限值。

注2：以上未列出的部件表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准的要求。



表示该电器电子产品虽然含有有害物质，但是在环保使用期限内(10年)，能放心使用且是可回收利用的。

关于保修

- 正常使用过程中如出现故障,自购买当日起1年内保修(耗材、配件除外)。另外,超过保修期后,寄送产品的运输费用由用户自行承担。
- 超过保修期后发生的故障,按实际维修费用收取。
- 保修期内的维修也可能产生费用,请仔细阅读免费维修规定的说明。
- 万一发生故障,请联系当地经销商或中国总代理(P.15)。

免费维修的相关规定

1. 根据使用说明书及本产品上所贴的标签上的相关内容进行使用时所出现的故障,可携带本产品前往购买本产品的经销商处接受免费维修。
2. 保修期间,产品发生故障并需要接受免费维修时,请携带本产品及其保修卡前往购买本产品的经销商处接受免费维修。
3. 住址搬迁时,请提前与购买本产品的经销商联系。
4. 如将本产品送作他人使用而导致本产品无法接受本说明书中所记载经销商的免费维修时,请联系当地经销商或中国总代理。
5. 保修期间,以下情况不属于无偿保修的对象范围。

(1) 使用不当或不恰当的维修及改造所造成的故障及损伤

(2) 电池及消耗品、配件等零部件更换时

(3) 因以下①~⑩而导致的故障及损伤

①使用不当 ②购买后,因运输、移动及跌落 ③不当的维修及改造 ④在高温、高湿的环境下使用 ⑤与本产品连接的其他电器设备的异常 ⑥非一般家用情况(例如:需长时间使用或使用异常电压等的商用情况)使用 ⑦(若说明书有指定的情况下)用指定以外的方法通电 ⑧使用非原装部件 ⑨装载在车辆、船舶上 ⑩在海外使用

(4) 火灾、地震、水灾、以及其他自然灾害,环境污染,以及战争和冲突造成的损坏

(5) 顾客疏忽导致的损伤,如坠落、浸泡、盗窃、遗失等情况

(6) 当出现改装或者拆卸的迹象时

(7) 当确认产品使用了我没有预期的使用方式,或不遵守我司提供的使用说明和安全说明时

(8) 保修证书或发票未附上时,或当购买日期和销售商名称未填写或盖章,或文字已被改写时

(9) 当根据我们的销售记录等判断产品被转让,转售,或为二手商品(包括拍卖购买、私人销售或非授权经销商购买等)时

(10) 当从制造和销售开始过了相当长的时间,修理或更换零部件的安排变得困难时

(11) 本保修卡中所规定的范围之外的情况

6. 保修地域仅限中国大陆地区。

※本保修卡对免费维修的时间及条件进行了一定约束,但并非是对客户在法律上应享有的权利进行限制。如对过了保修期的修理尚有不明确之处,可向购买本产品的经销商咨询。

※因自然使用所导致的本品性能劣化、消耗及消耗品的更换属于无偿保修对象范围外。

※保修地域仅限中国大陆地区。

No. _____

保修卡

凭卡修理

品 类	家用美容仪	型 号	YJFD4
名 称	速效焕颜仪		
保 修	对 象	时 间	
	仅本体 (不含消耗品)	自购买本产品 当日起一年内	
※ 经 销 商	门店名称/地址/联系 请贴上标有购买日期的 明细或者将其与本质保书 一起保管。		

请经销商将带有※的必填栏填写完毕相关的信息,然后交回客户保管。

制造商

ヤーマン株式会社

邮编: 135-0045 东京都江东区古石场1-4-4
日本官网: <https://www.ya-man.com>



日本官网

本保修卡承诺根据记录的内容免费维修。

左列“免费保修期”内发生故障时,请携带本产品及保修卡前往购买本产品的经销商进行维修。

·如果本卡的空白栏中没有按规定填上购买日期或没有购买明细,则此保修卡无效。

·本保修卡不接受补办,请妥善保管。

中国总代理

广东倍捷医疗科技有限公司

地址: 广东省佛山市顺德区盈峰商务中心
客户服务中心: 400-931-8556

中国官网: <https://www.ya-manchina.com/>

